


Ensemble pour Décubitus Ventral simplifiant l'installation des patients en SDRA, composé de trois à quatre matelas à densités spécifiques

- A. Un coussin souple à mémoire de forme pour soutenir la tête pivotée sur un coté. Large passage pour la ligne de ventilation et sans compression du globe oculaire et du nez.
- B. Un coussin bi-densité (noyau ferme + mémoire de forme) pour rehausser le sternum, décompresser l'abdomen, tout en soulageant les épaules, et adapté aux patients en surpoids. Disponible en largeur 300 ou 500mm
- C. Au besoin un coussin bi-densité (noyau ferme + mémoire de forme) pour rehausser les crêtes iliaques en largeur 500mm
- D. Un coussin relève jambes pour décharger la pression au niveau des pieds.



- ✓ Entièrement thermosoudés, étanches, avec membranes hydrophobes.
- ✓ Fabrication identique à celle de nos matelas de table d'opération reconnus pour leurs qualités prophylactiques.
- ✓ Légers, particulièrement durables et faciles à entretenir et désinfecter.

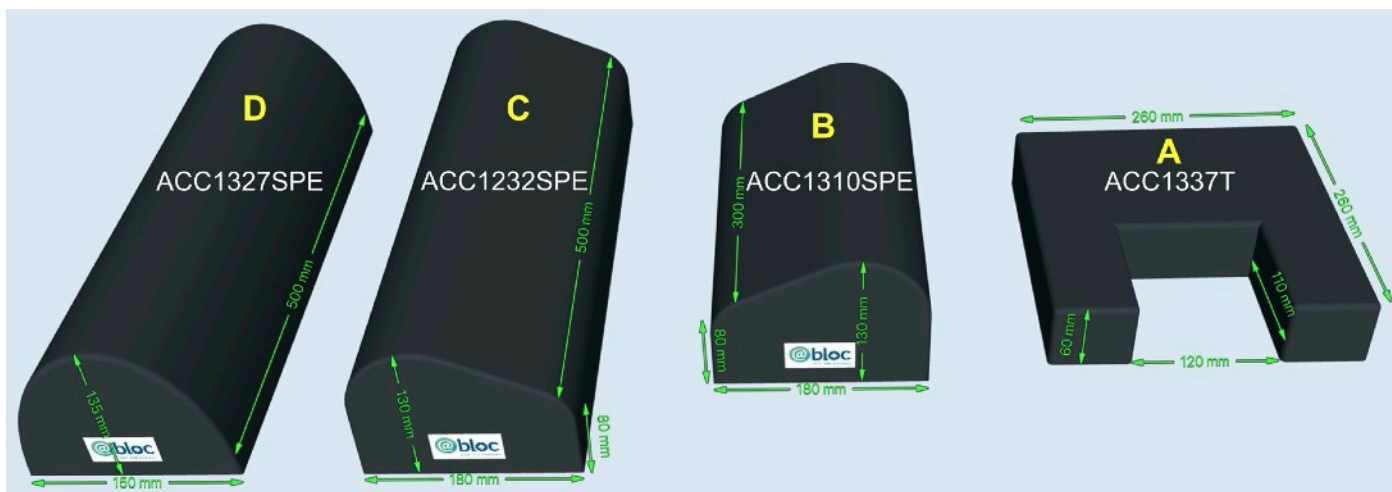

Aperçu des combinaisons possibles

- Le coussin sous sternum est plus indiqué en 300mm de largeur si les bras sont en avant (B)
- Si les bras sont le long du corps, préférer la version 500mm (C)
- Le coussin de tête est réversible gauche /droite pour alterner les zones d'appuis

